


Sintérisation avec coupelles rapides

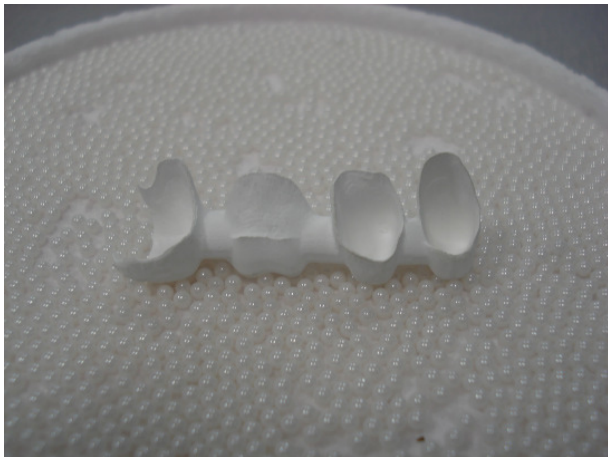

CONFORME

- Une couche de billes
 - Couvrir de 90% - 95%
 - Les billes doivent pouvoir bouger librement
-
- Placer la prothèse à l'envers
 - Bridge de 5 éléments maximum

NON CONFORME

- Plusieurs couches de billes
 - Coupelle remplie à rabord
 - Les billes sont bloquées
-
- Le bridge n'est pas placé à l'envers ou est placé sur le côté
 - Des billes sont coincées dans les dents
-
- Trop de billes usagées utilisées
 - Les billes usagées ne se déplacent plus librement
-
- Les billes utilisées sont de tailles différentes
 - Les billes utilisées ne dépacent pas librement